

Les piliers de cicatrisation Encode® Emergence

Procédure prothétique

Le système de prise d'empreinte Encode offre aux praticiens des solutions optimisées en éliminant l'utilisation de transferts d'empreinte sur les implants, ce qui simplifie le protocole de traitement pour le chirurgien, le correspondant et le laboratoire dentaire. En outre, les patients bénéficient d'une meilleure expérience et d'excellents résultats esthétiques.

Utilisation du pilier de cicatrisation en tant que transfert d'empreinte ou Scanbody : les codes uniques sur la surface occlusale du pilier de cicatrisation Encode Emergence permettent d'éviter de remplacer le pilier par un transfert d'empreinte ou un Scanbody.

Préservation des tissus durs et des tissus mous : le fait de conserver le pilier de cicatrisation au lieu de changer les composants permet de préserver les tissus et d'obtenir des résultats esthétiques.

Profils d'émergence naturels :

- Cicatrisation plus naturelle des tissus avec augmentation progressive des profils d'émergence.
- Limitation du profilage osseux lorsqu'un implant est placé à une profondeur maximale de 1 mm sous la crête osseuse, grâce à une conception dans le prolongement de la plate-forme sur 1 mm de hauteur.
- Disponibles dans différents diamètres de profil d'émergence et en trois hauteurs : 3, 5 et 7 mm.

Aspect rose mat couleur gencive pour une prise d'empreinte précise et une meilleure esthétique : l'aspect rose mat offre des résultats esthétiques après l'intervention chirurgicale et réduit la réverbération lors de la prise d'empreinte à l'aide d'une caméra intra-orale pour des images plus précises.

Codes intuitifs : conception d'un encodage unique pour faciliter l'interprétation :

- Le nombre de creux sous la ligne droite sur la surface occlusale du pilier indique le diamètre de la plate-forme.
- Le nombre de creux sur le côté droit du dôme occlusal du pilier indique la hauteur du pilier.

Flux de travail flexibles : après la prise d'empreinte traditionnelle ou numérique du pilier de cicatrisation Encode Emergence, envoyez le cas au laboratoire de votre choix pour la réalisation d'une prothèse définitive avec Ti-base ou sur pilier CFAO.

Empreinte numérique avec caméra intra-orale



Nettoyez la surface occlusale du pilier de cicatrisation Encode Emergence pour éliminer les débris.



Prenez l'empreinte des piliers de cicatrisation Encode Emergence avec une caméra intra-orale conformément aux instructions du fabricant.



Vérifiez que la prise d'empreinte a permis de capturer toute la surface occlusale codée du ou des piliers de cicatrisation Encode Emergence, tous les contours des tissus mous et l'ensemble de la circonférence du pilier de cicatrisation.




Prenez l'empreinte de l'arcade opposée et enregistrez l'occlusion.

- 5 Envoyez les empreintes réalisées à votre laboratoire.

Piliers de cicatrisation Encode Emergence – Procédure prothétique

Empreinte traditionnelle

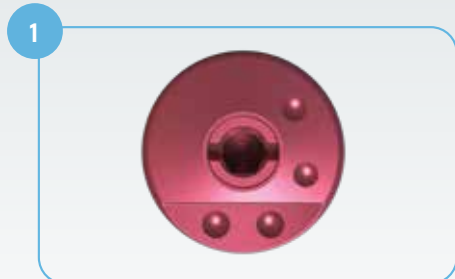

1 Nettoyez la surface occlusale du pilier de cicatrisation Encode Emergence pour éliminer les débris.




2 Utilisez un matériau d’empreinte de faible densité autour du ou des piliers de cicatrisation et un matériau d’empreinte élastomère de densité moyenne (polyéther ou polyvinyle) dans le porte-empreinte et mettez en bouche.



3 Une fois que le matériau d’empreinte a pris, retirez le porte-empreinte de la bouche. Vérifiez qu’une empreinte claire de toute la surface occlusale codée des piliers de cicatrisation Encode Emergence a été réalisée (sans défaut, ni bulle d’air, ni déformation), intégrant toute la circonférence du pilier de cicatrisation et les contours des tissus mous.



4 Prenez une empreinte de l’arcade opposée et enregistrez l’occlusion.

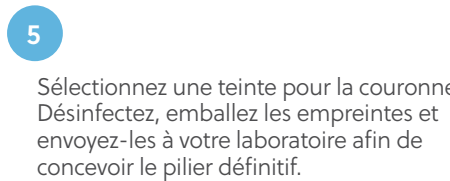

5 Sélectionnez une teinte pour la couronne. Désinfectez, emballez les empreintes et envoyez-les à votre laboratoire afin de concevoir le pilier définitif.

Pour plus de détails sur les piliers de cicatrisation Encode, contactez-nous au 01 41 05 43 43 ou envoyez un email à : ZV.commandes@ZimVie.com

ZimVie Dental Global Headquarters
4555 Riverside Drive
Palm Beach Gardens, FL 33410
Phone: +1-561-776-6700
Fax: +1-561-776-1272
dentalCS@ZimVie.com
www.ZimVie.com/dental

Zimmer Dental SAS
Bâtiment Québec
19 Rue d’Arcueil
94528 Rungis Cedex
Tel. : 01 41 05 43 43
Fax : 01 41 05 43 40
ZV.commandes@ZimVie.com

 **ZimVie**
Restoring Daily Life.™

Sauf indication contraire, comme indiqué ici, toutes les marques déposées et tous les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de ZimVie Inc. ou d’une filiale et tous les produits sont fabriqués par une ou plusieurs des filiales dentaires de ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., etc.), commercialisés et distribués par ZimVie Dental et par ses partenaires de commercialisation autorisés. Pour plus d’informations sur le produit, veuillez consulter l’étiquette individuelle ou le mode d’emploi du produit. L’autorisation et la disponibilité du produit peuvent être limitées à certains pays/certaines régions. Ce document s’adresse uniquement aux praticiens et n’a pas pour objectif de fournir un avis médical ou des recommandations. La distribution à tout autre destinataire est formellement interdite. Ce document ne peut être ni copié ni réimprimé sans l’autorisation écrite expresse de ZimVie. ZVINST0006FR RÉV. B 03/23 ©2023 ZimVie. Tous droits réservés.

CE
2797

